Определение ширины запрещенной зоны полупроводников по спектральной зависимости собственной фотопроводимости

Шмаков Владимир Евгеньевич - ФФКЭ гр. Б04-105

26 марта 2024 г.

Цель работы

Определение ширины запрещённой зоны различных материалов по спектральной зависимости собственной фотопроводимости;

Теоретические сведения

При воздействии на полупроводник излучения с энергией кванта $h\nu$, превышающей ширину запрещённой зоны E_g в зоне проводимости, и соотвественно в валентной зоне возникают неравновесные электроны и дырки. Их появление связано с переходами электронов из валентной зоны проводимости. В результате увеличивается проводимость кристалла. Это явление называется собственной фотопроводимостью.

В непрямозонных полупроводниках типа германия и кремния минимум зоны проводимости и максимум валентной зоны расположены в различных точках зоны Бриллюэна. В этом случае оптический переход электрона из вершины валентной зоны в минимум зоны проводимости возможен лишь при участии третьей частицы – фонона. В соответствии с законом сохранения импульса квазиимпульс такого фонона $q_{\Phi} \approx \hbar k_{\rm B}$, а энергия $\hbar \omega$ должна удовлетворять закону сохранения энергии:

$$h\nu = E_g \pm \hbar\omega_q + \hbar^2 (k_n - k_c)^2 / 2m_n + \hbar^2 k_p^2 / 2m_p$$
 (1)

где k_n и k_p – начальные волновые числа электрона и дырки, а k_c – конечное волновое число электрона.

Таким образом, край основной полосы поглощения в полупроводниках типа кремния и германия определяется непрямыми оптическими переходами, сопровождающимися поглощением и испусканием фононов. При этом для разрешённых переходов, которые доминируют в полупроводниках такого типа, коэффициент поглощения:

$$K = C \left[\frac{(h\nu - E_g + \hbar\omega_q)^2}{\exp\frac{\hbar\omega_q}{kT} - 1} + \frac{(h\nu - E_g - \hbar\omega_q)^2}{1 - \exp\frac{\hbar\omega_q}{kT}} \right]$$
(2)

При больших энергиях квантов $h\nu > (E_g + \hbar\omega_q)$ начинают преобладать переходы с эмиссией фононов и зависимость $K^{1/2}$ от $h\nu$ должна аппроксимироваться прямой, пересекающей ось энергии в точке $h\nu_1 = E_g + \hbar\omega_q$.

При рассмотрении случая сильного поглощения излечения в образце (оптически толстый образец), то есть при d/K << 1, где d — толщина образца, скорость генерации электронно-дырочных пар экспоненциально уменьшается от поверхности вглубь образца:

$$g(x) \approx K(1-R)N_0 \exp{-Kx} \tag{3}$$

где R – коэффициент отражения света, а N_0 – поток квантов на единицу поверхности.

Неоднородная германия электронов и дырок в направлении освещения приводит к появлению диффузионнодрейфовых потоков носителей заряда: быстро диффундирующие носители (электроны) опережают медленные (дырки), что приводит к возникновению электрического поля, ускоряющего медленные носители и замедляющего быстрые и к появлению дрейфовых составляющих потоков. При этом изменение проводимости $\Delta\Sigma$ существенным образом зависит от граничных условий на поверхности образца:

$$\Delta \Sigma \sim N_0 \left(1 + \frac{S}{D} \frac{1}{K} \right) \tag{4}$$

где S – скорость поверхностной рекомбинации, D – коэффициент амбиполярной диффузии.

Методика

Экспериментальная установка

Для изменения фотоответа полупроводника $\Delta\Sigma$ образец включается последовательно с нагрузочным сопротивлением и источником постоянного напряжения. При освещении проводимость образца возрастает, происходит перераспределение напряжение между образцом и нагрузкой. В результате падение напряжения U на образце при малом относительном увеличении проводимости уменьшается на величину

$$\Delta U = \varepsilon \frac{R_H \cdot R_0^2}{(R_H + R_0)^2} \Delta \Sigma \tag{5}$$

где ε – постоянное напряжение, R_H и R_0 – сопротивление нагрузки и образца, Σ – проводимость.

Для повышения чувствительности измерения обычно проводят при периодическом прерывании светового потока. При этом соотношение (5) характеризует амплитуду отрицательных импульсов напряжения на концах образца. Для исследования интересующих нас зависимостей $\Delta\Sigma/N_0$ от энергии кванта $h\nu$ наряду с ΔU необходимо знать спектральное распределение интенсивности источника излучения $N_0(h\nu)$.

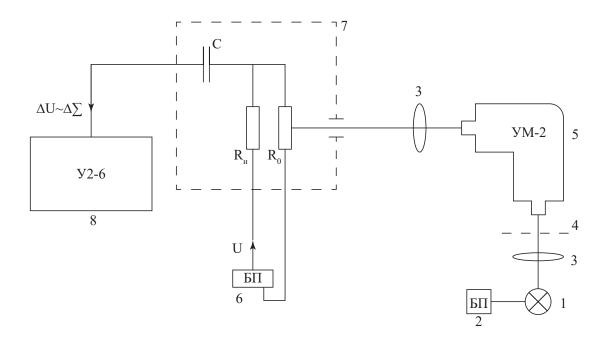


Рис. 1: Схема экспериментальной установки. 1 — осветитель, 2 — блок питания осветителя, 3 — линзы, 4 — механический модулятор излучения, 5 — монохроматор, 6 — блок питания образца, 7 — схема включения образца, 8 — усилитель

Обработка экспериментальных данных

Экспериментальные данные представлены на рисунках 2, 3.

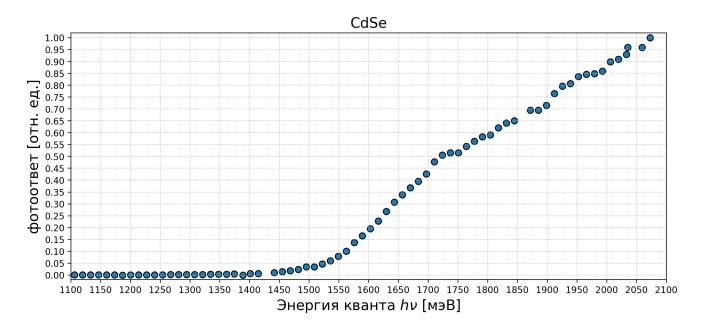


Рис. 2: Экспериментальные данне Селен

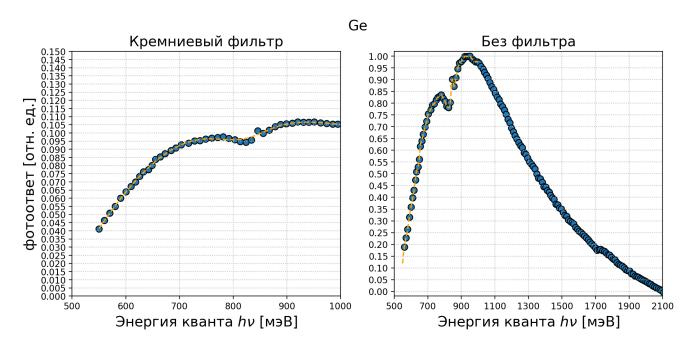


Рис. 3: Экспериментальные данне Германий

Данные эксперимента с германием позволяют оценить спектральную характеристику для Кремния. Поделив данные полученные без фильтра на данные, полученные с фильтров получим функцию пропускания(характеристику для кремния).

Построив зависимость квадрата фотоответа от величины энергии кванта можно оценить ширину запрещенной зоны.

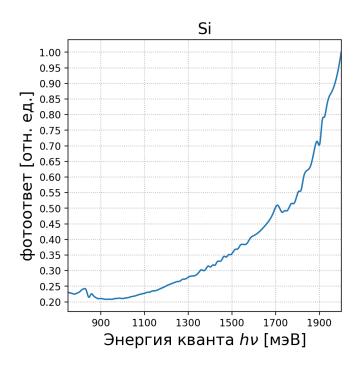
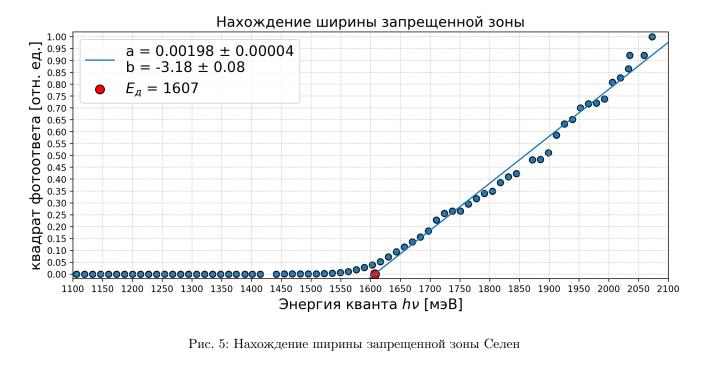


Рис. 4: Оценка характеристики кремния



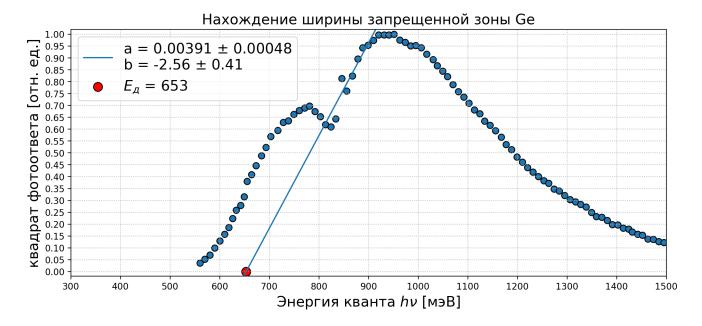


Рис. 6: Нахождение ширины запрещенной зоны германий

Вывод

Удалось найти ширину запрещенной зоны германия и селена. Полученные результаты сходятся с табличными значениями.